



Disodli'r tiwb tenau – GN ReSound

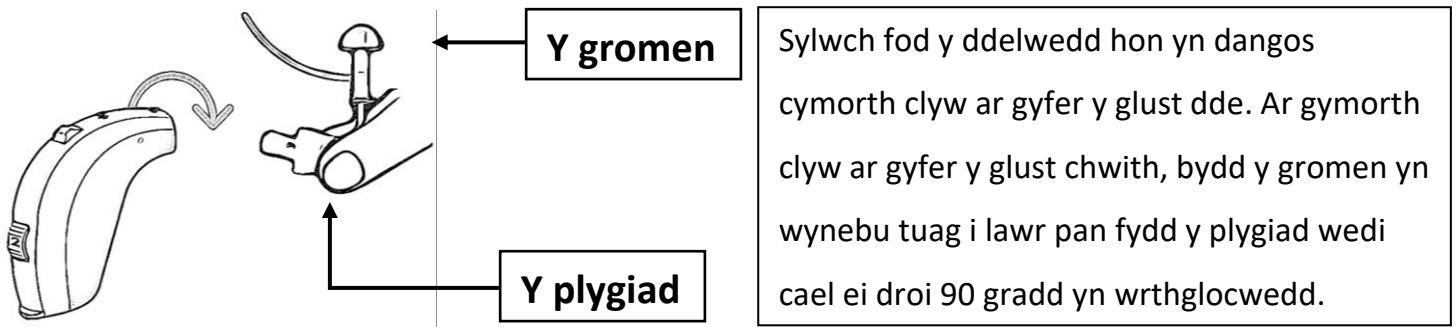

Trowch y plygiad (y darn o blastig sy'n cysylltu'r tiwb a'r cymorth clyw) 90 gradd yn wrthglocwedd, yna tynnwch y plygiad allan o'r cymorth clyw, fel yn y llun uchod. Ar ôl ei droi 90 gradd yn wrthglocwedd, gwthiwch blygiad y darn newydd i mewn i'r cymorth clyw. Pan fydd y plygiad yn y cymorth clyw, trowch y plygiad yn glocwedd i 12 o'r gloch er mwyn ei gadw yn ei le. Sicrhewch fod y tiwb ddim yn troi pan fyddwch chi'n ei ddisodli.

Sut mae gwybod pa un yw'r chwith a'r dde

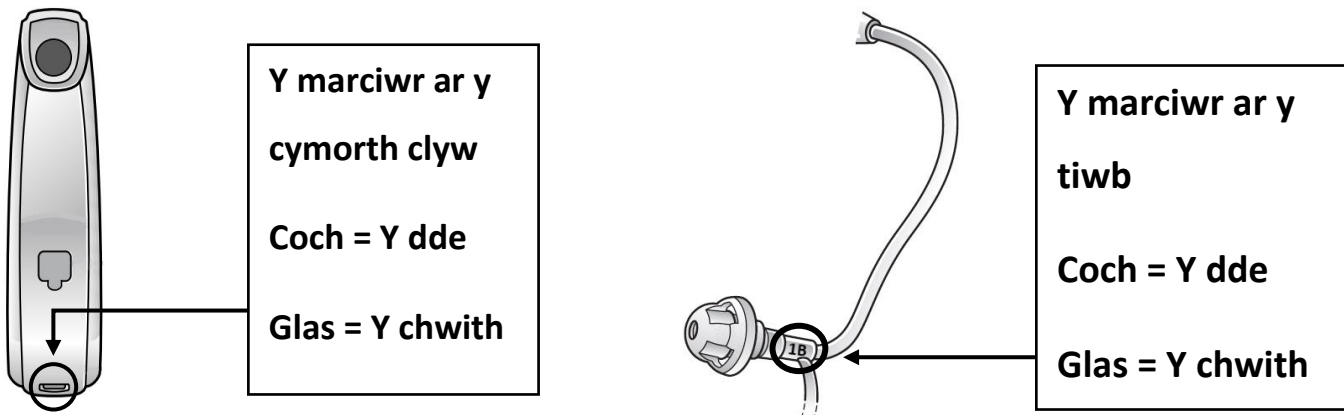

Mae eich cymhorthion clyw yn cael eu rhaglenni i gyfateb i'ch clyw ym mhob clust, felly mae'n bwysig gwisgo'r cymorth clyw cywir ar yr ochr gywir. Ar waelod y cymorth clyw, dylech chi allu gweld smotyn coch neu las (sef y marciwr ar y cymorth clyw). Mae'r marciwr coch yn dynodi'r cymorth clyw ar gyfer yr ochr dde ac mae'r marciwr glas yn dynodi'r cymorth clyw ar gyfer yr ochr chwith. Felly, ar waelod eich tiwb, dylech chi allu gweld rhif a llythyren mewn coch neu las. Sicrhewch fod y tiwb cywir yn cyfateb i'r cymorth clyw cywir.